




SYSTÈME EOLE™ 20 cm D'AIR



ENVIRONNEMENT LIT
GAMME MATELAS MOTORISÉS

SYSTÈME EOLE™ 20 cm D'AIR

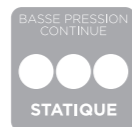

DESRIPTIF
Matelas thérapeutique Basse Pression Continue dynamique

INDICATIONS
Aide à la prévention : **Risque Élevé**
Aide au traitement des escarres : Stade 1 à 4 inclus (plus d'informations pages 54, 55)

MODÈLES DISPONIBLES



EOLE™ 20 cm d'air



SAC DE TRANSPORT DISPONIBLE

MODÈLE	REF				
Matelas EOLE™ 20 cm d'air avec sa housse intégrale technologie argent + unité de contrôle	P1000DFNY	90 x 200 cm	86 x 203 cm	20 cm	Pas de poids mini Poids max : 200 kg
Matelas EOLE™ 20 cm d'air avec sa housse intégrale technologie argent + unité de contrôle + sac	P1000DFNYSAC	90 x 200 cm	86 x 203 cm	20 cm	Pas de poids mini Poids max : 200 kg
Cellule seule orange	2870004001				
Cellule seule zone talons transparente	2871004002				
Housse partie supérieure technologie argent	2871002000				
Housse partie inférieure	2871003000				
Unité de contrôle pour EOLE™ 20 cm d'air	2871001000				
Gonfleur rapide universel	8PGU0001				
Sac de transport	PSAC01				


* Dans le cadre spécifique de la prise en charge par l'Assurance Maladie, les caractéristiques des poids extrêmes peuvent être considérées différemment.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE



MATELAS À AIR DYNAMIQUE

- 20 cm d'air pour une immersion maximale du patient dans le support
- Composé de 20 cellules à double compartiment indépendantes, interchangeables et remplaçables fixées par boutons pression, dont 5 cellules talonnières différenciées.
- Matériau souple et résistant (nylon), conception longue durée.
- Mode transport : autonomie 6 h minimum. Le patient peut être déplacé (vers une autre chambre, au bloc...), tout en restant sur un support thérapeutique alors statique.
- 2 bandes centrales de maintien des cellules pneumatiques, reposant sur un support amovible.
- Désinfection simple et rapide du support.

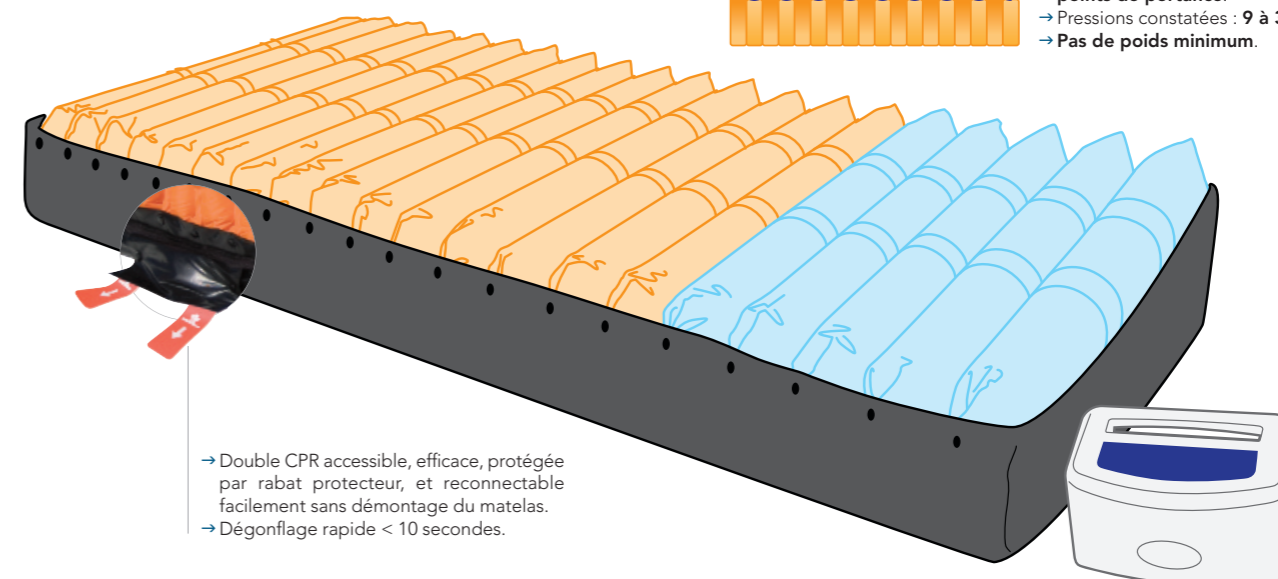

- Double CPR accessible, efficace, protégée par rabat protecteur, et reconnectable facilement sans démontage du matelas.
- Dégonflage rapide < 10 secondes.

BASSE PRESSION CONTINUE (BPC)

- Technologie visant à favoriser l'immersion « naturelle » du patient afin de maximiser la surface de portance et ainsi de répartir de façon plus harmonieuse les pressions d'interface sur l'ensemble de la surface corporelle, ce qui permet par là même de réduire les pressions exercées en regard des zones à risque d'escarre
- Efficacité reconnue, en préventif comme en curatif
- **Pas de poids minimum**
- Poids maximum : **200 kg**


BASSE PRESSION CONTINUE




- Immersion du patient et optimisation des points de portance.
- Pressions constatées : **9 à 32 mmHg.**
- **Pas de poids minimum.**

UNITÉ DE CONTRÔLE À TOUCHES DIGITALES

- Prévention et traitement assurés en Basse Pression Continue
- Pas de poids minimum
- 2 modes d'utilisation possible : statique ou dynamique alterné
- **En mode dynamique, « micro-alternance » des points d'appuis au travers des cycles toutes les 6 minutes**
- Mode soins se désactivant au bout de 30 minutes
- Mise en veille automatique du compresseur s'il n'est pas sollicité (mode statique)
- Réglage possible sans altérer le principe de Basse Pression Continue. Position « max » adaptée pour faciliter les soins, la toilette, et les transferts.
- Facilité d'utilisation : aucun risque de surgonflage
- Sécurité : présence d'alarmes visuelles et sonores (en cas de coupure électrique, de chute du patient, perte d'air...)
- Touche de verrouillage clavier
- Filtre anti-poussière interchangeable

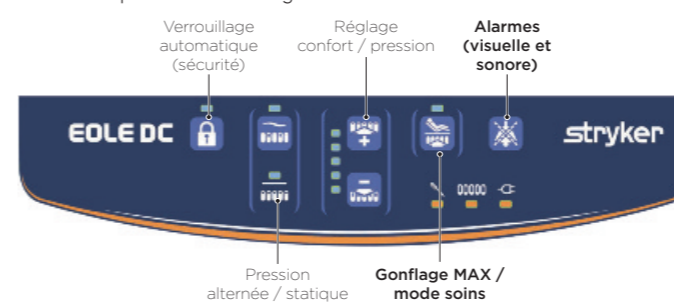

1 VERSION DE HOUSSE DISPONIBLE Plus d'infos p. 95

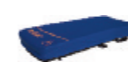


- Housse intégrale technologie argent**
- Structure en 2 parties indépendantes.
- Enduction de Polyuréthane sur textile type jersey traité avec la technologie Argent Ag2+ : anti-bactérien (y compris MRSA) et antimicrobien.
- Bi-extensible, hyper-respirante afin de diminuer l'effet de macération et imperméabilisée.



MATELAS POLYVALENT

- Autorise de nombreuses configurations.
- Possibilité de créer une décharge talonnière totale

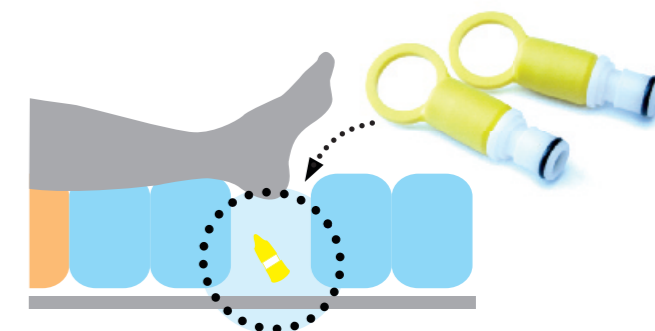

INSTALLATION FACILITÉE

- Fermeture de la housse par fermeture éclair facilitant le housage / déhousage.
- 6 sangles latérales de fixation du matelas au cadre fixe du lit.

